



Fiche technique du produit

Réf. IC-2 / Capuche Intégral en Polypropylène avec Masque Intégré



Informations techniques :

Capuche intégral en polypropylène (PP) de 20g, conçu pour des risques minimaux et usage unique. Intègre un masque chirurgical Type IIR ajustable avec un élastique derrière la nuque, assurant une protection complète et une filtration efficace.

- Matière Première : Polypropylène 20g
- Masque Chirurgical : Type IIR à trois couches, ajustable grâce à une gomme derrière la nuque
- Dimensions : 21" de diamètre (53 cm)
- Usage Unique : Oui
- Produit sans Latex : Oui

Normes et utilisation :

- Conforme au **Règlement UE 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux - Classe I
- Conforme au **Règlement UE 2016/425** sur les équipements de protection individuelle (EPI Catégorie I)
- Conforme au **Règlement UE 10/2011** sur les matériaux plastiques en contact avec les aliments, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du Règlement (CE) n.º 1935/2004
- Fabriqué sous les standards de la norme **ISO 13485:2003+AC2007**

Instructions d'utilisation :

1. Vérifiez l'état et la date de péremption avant utilisation.
2. Lavez-vous les mains avant d'utiliser le produit.
3. Déballez le bonnet avec précaution, étendez le plissé doucement pour ne pas déchirer le polypropylène.
4. Positionnez soigneusement le bonnet sur les zones d'ajustement pour une protection optimale.
5. Ne pas réutiliser.


Informations logistiques :

Étiquetage conforme aux normes applicables

Présentation :

- Sac de 50 unités avec étiquetage conforme
- Carton principal : 500 unités (10 sacs de 50 unités)
- Dimensions de la Boîte : 37x29x30 cm
- Palette Euro : 56 cartons

Réf.	Couleur	Code EAN
IC-2-B	Bleu	0685071209806
IC-2-W	Blanc	0685071893463
IC-2-G	Vert	0685071569207
IC-2-R	Rouge	0685071424469

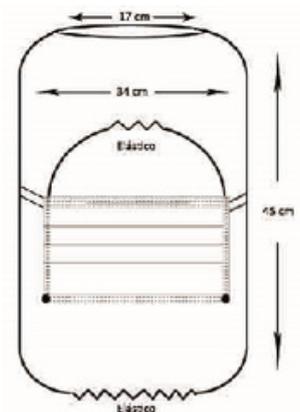

Conservez dans un endroit sec, propre, à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.

